




جهاز تجميل 7 ألوان
للوجه والرقبة

مكونات المنتج



استخدام النصائح

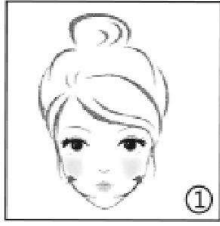


1. رسالة من
من الذقن إلى الخد



2. رسالة من
من الخد إلى زاوية العين الخارجية
ركن



3. رسالة من
من الرقبة إلى الذقن

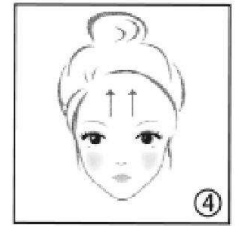

4. دلكي
الجهة من الأسفل
إلى الأعلى

احتياطات السلامة

- لا ينصح عموماً باستخدام هذا المنتج للأشخاص الذين خضعوا لجراحة تجميلية للوجه، أو لديهم غرسة معدنية تحت الجلد، أو الحوامل، أو خلال فترة الحيض.
- امسح رأس التدليك بالمناديل أو قطعة قماش بعد الاستخدام. لا تغسله بالماء.
- يرجى عدم وضعه في الحمام أو في أماكن رطبة أخرى، لأنه من السهل أن يسبب ماس كهربائي.
- يرجى عدم استخدام المحاليل المسببة للتآكل (الكحول، زيت الموز، البنزين، مزيل طلاء الأظافر وما إلى ذلك) لمسح الجهاز، مما قد يؤدي إلى تلف المنتج أو تشقق المكونات وتغير لونها وغير ذلك.
- لا يمكن استخدام كل وضع إلا مرة واحدة في اليوم، ويوصى باستخدام ثلاثة أوضاع متتالية مرة واحدة كل يوم.

معلمة المنتج

اسم المنتج	جهاز تجميل 7 ألوان للوجه والرقبة
شحن الجهد	فولت = 1 أمبير 5
القوة المصنفة	واط 3
معلمة البطارية	فولت/400 مللي أمبير 3.7
وقت الشحن	ساعتين
حجم المنتج	بوصة 5.25*3*1.25