



هوشولا جهاز تجميل الرقبة

دليل استخدام المنتج

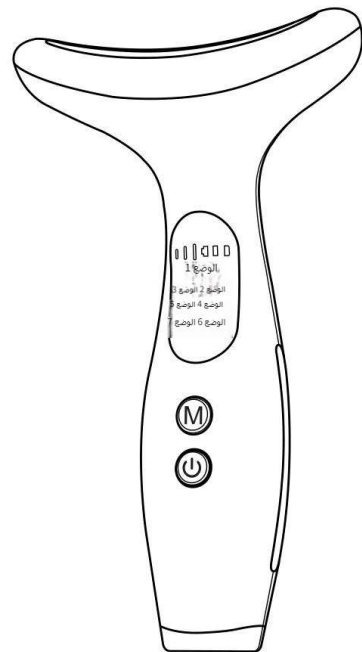

تعريف الزر

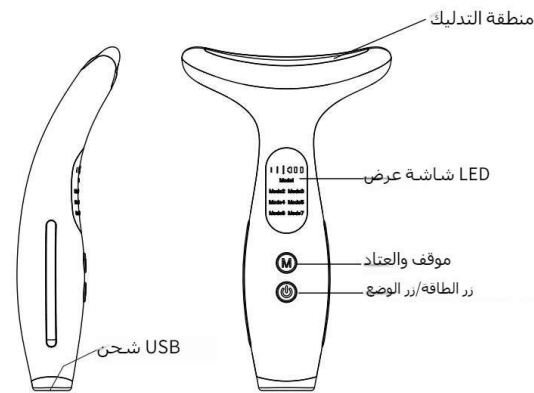

1. اضغط مطولاً على زر الطاقة واضغط قصيراً على زر. الوضع للتبديل بين سبعة أوضاع للتشغيل. إذا لم يتم إجراء أي عملية، فسيتم إيقاف التشغيل تلقائياً في غضون 15 دقيقة.
2. اضغط قصيراً على زر التروس للتبديل بين مستويات قوة. المحرك من 1 إلى 3، وسيضيء ضوء الترس المقابل.

الوضع 1	الوضع 2	الوضع 3	الوضع 4	الوضع 5	الوضع 6	الوضع 7
الوضع 1	الوضع 2	الوضع 3	الوضع 4	الوضع 5	الوضع 6	الوضع 7
الوضع 1	الوضع 2	الوضع 3	الوضع 4	الوضع 5	الوضع 6	الوضع 7
الوضع 1	الوضع 2	الوضع 3	الوضع 4	الوضع 5	الوضع 6	الوضع 7
الوضع 1	الوضع 2	الوضع 3	الوضع 4	الوضع 5	الوضع 6	الوضع 7
الوضع 1	الوضع 2	الوضع 3	الوضع 4	الوضع 5	الوضع 6	الوضع 7
الوضع 1	الوضع 2	الوضع 3	الوضع 4	الوضع 5	الوضع 6	الوضع 7

أدخل كابل الشحن في وضع الشحن عندما يكون الجهاز مغلقاً أو مفتوحاً. سيضيء ضوء مؤشر الشحن وسيظل ضوء مؤشر البطارية المشحونة بالكامل مضاء.

المعلومات الفنية

اسم المنتج	جهاز تجميل الرقبة المنزلي
موديل المنتج	HY93
الفولطية	فولت 3.7
القوة المصنفة	واط 2
حجم المضيق	مم 141x86x42
مدة الشحن	ساعة 23
محول الطاقة	DC5V --- 1A (USB)

قائمة المنتجات

X1 جهاز تجميل الرقبة

x1 خط كهرباء

دليل 1x

صيانة المنتج

1. يرجى محاولة حفظ هذا المنتج في بيئة جافة ودرجة حرارة الغرفة أو في صندوق تخزين.
2. لا تفرط في الشحن لتجنب الإضرار بعمر البطارية.
3. يرجى مسح المنتج نظيفاً بعد الشحن ووضعه في صندوق التخزين إذا لم يتم استخدامه لفترة طويلة.
4. يمكن مسح الجزء الخارجي من المنتج لتنظيفه.
5. أثناء الاستخدام، سيصبح الجهاز ساخناً قليلاً، ولكن من الطبيعي ألا يكون ساخناً.
6. يحظر شطف جسم الطائرة مباشرة بالماء.
7. إذا لم يتم استخدامه لفترة طويلة، يرجى شحن البطارية مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر.

تحذير الاستخدام

1. يحظر استخدامه مع الأجهزة الكهربائية الطبية المزروعة في الجسم، مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب، لأنه قد يتسبب في تعطل الجهاز أو إثارة الخطر.
 2. لا تستخدم هذا المنتج إذا كانت راحة يدك تعاني من مشاكل جلدية مثل الجروح أو الإكزيما أو البثور أو التقشير.
 3. لا تستخدم هذا المنتج في الأماكن ذات الرطوبة العالية مثل الحمامات.
 4. يرجى عدم استخدام هذا المنتج لأغراض أخرى غير الغرض المقصود منه.
- يستخدم.
- يرجى عدم تفكيك هذا المنتج أو إصلاحه أو تعديله دون إذن. فقد يتسبب ذلك في تعطل الجهاز أو حدوث إصابة.
- يرجى عدم إعطاء هذا المنتج للأطفال.
- دون سن 13 عاماً لتجنب الإصابات الشخصية.

RoHS CE FC O
صنع في الصين