

## Scan Code To Download APP PRODUCT MANUAL



### How to download

App Store

Apple users can search for and download Endoscope Tool from the App Store.

Google Play

Android users can search for and download Endoscope Tool on Google Play.

### Connection Flow

1. First of all, when you get the product, ensure sufficient power, press switch key to open
2. Open phone settings WiFi Function



3. Connect softish-xxx
4. Open the APP click the start



Turn on the eardrum recognition warning function  
Alarm after seeing eardrum recognition.



5. If you encounter this prompt, please do not switch WiFi, continue to use



6. Use APP to record and take pictures



7. Open the APP Interface Click to start FAQ



8. Please in the FAQ Find a solution



### Precautions


1. When cleaning the lens, please wipe it carefully with a professional alcohol swab.
2. When the image is not clear, wipe the camera with a cotton swab.
3. When you are moving, please do not use it and protect it from being hit by others.
4. This product is not suitable for children under 3 years old.
5. Avoid direct exposure of the product to the sun, especially the ear speculum body, to avoid softening.
6. Do not use the machine body in liquid to avoid damage caused by immersion.
7. Avoid direct exposure of the product to the sun, especially the accessories, to avoid softening.
8. During use, the temperature of the product will rise slightly (up to 35°C), please safe to use.
9. In order to ensure the best use experience, please ask your child to pick a Hold a sitting position.

### Troubleshooting

Malfunction	Solution
Light does not turn on after opening no response	1. Press the power button to turn on 2. Please use the charging cable to charge to ensure sufficient power
The earpick accessory tool is not installed smoothly	First, align the ear muff with the lens spoon, cover the outer ring of the camera again to ensure that it is installed to the end
Cannot see image, the image connection is stuck	Click the return key in the App, then click start, if it is invalid, press the power button again to reconnect
The phone cannot connect to the products	If the device WiFi cannot be connected, but the button and camera indicator light are always on, it means the device is connected to other phones. Please disconnect the WiFi connection of the other mobile phone at this time, the blue light flashes slowly (the connection after flashing)

Q: Can't use the product after WiFi connection is completed?

1. If you are using VPN , please turn off the VPN service and try again.
2. If you can't solve the problem after turning off the VPN, please follow the instructions below for setting.

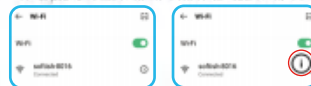

Step 1: Turn on the WiFi and find the wireless link

Step 2: Click the circled icon



Step 3: Choose to remove this network and reconnect

3. If it still can't be solved, please uninstall the software and install it again.

## 接続の流れ

①

まず、いつ  
製品を手に入れたら、  
十分な量を確保する  
電源、押す  
キーを切り替えて開きます

②

電話を開く  
設定  
WiFi機能

③

接続する  
ソフトなxxx

④

アプリを開く  
スタートをクリックします

⑤

遭遇したら  
このプロンプト、  
しないでください  
WiFiを切り替えて、  
使い続ける

⑥

アプリを使用する  
レコードする  
そして写真を撮ります

⑦

鼓膜認識をオンにする  
警告機能  
鼓膜を見た後のアラーム  
認識

⑧

アプリを開く  
インターフェース  
クリックしてFAQを開始します

⑨

よくある質問に記載してください  
解答を見つける

## Verbindungsfluss

①

Zuallererst, wenn Sie  
Holen Sie sich das Produkt,  
stellen Sie sicher Wenn gen ü gend  
Leistung vorhanden ist,  
dr ü cken Sie Schl ü ssel  
zum Öffnen umschalten

②

Öffnen Sie die  
Telefoneinstellungen  
WiFi-Funktion

3

Leistung Schmecken  
softish-xxx

4

Öffnen Sie die APP  
Klicken Sie auf den Start

5

Wenn Sie stoßen  
diese Aufforderung,  
Bitte nicht wechseln  
WLAN, weiterhin nutzen

6

APP nutzen  
aufnehmen  
und Fotos machen

7

Schalten Sie die Warnfunktion zur  
Trommelfellerkennung ein  
Alarm nach Trommelfellerkennung

8

Öffnen Sie die APP-Schnittstelle  
Klicken Sie hier, um die  
FAQ zu starten

9

Bitte in den FAQ  
Finde eine Lösung

## Flux de connexion

1

Tout d'abord, quand  
vous obtenez le produit,  
assurer suffisamment  
puissance, appuyez sur  
changer de clé  
pour ouvrir

2

Téléphone ouvert  
paramètres  
Fonction Wi-Fi

3

Connecter  
doux-xxx

4

Ouvrez l'application  
cliquez sur le début

5

Si vous rencontrez  
cette invite,  
Merci de ne pas  
changer de WiFi,  
continuer à utiliser

6

Utiliser l'application  
enregistrer  
et prendre des photos

7

Activez la reconnaissance du tympan  
fonction d'avertissement  
Alarme après avoir vu le tympan  
reconnaissance

8

Ouvrez l'application  
interface  
Cliquez pour  
démarrer la FAQ

9

S'il vous plaît dans  
la FAQ  
Trouver une solution

## Flusso di connessione

1

Prima di tutto, quando tu  
prendi il prodotto, assicurati  
potenza sufficiente,  
premere interruttore a  
chiave per aprire

2

Apri il telefono  
impostazioni  
Funzione Wi-Fi

3

Collegare  
morbido-xxx

4

Apri l'APP  
fare clic su Inizio

5

Se incontri  
questo suggerimento,  
per favore non farlo  
cambia Wi-Fi,  
continuare a utilizzare

6

Use APP  
to record  
and take pictures

7

Attiva il riconoscimento del timpano  
funzione di avviso  
Allarme dopo aver visto il timpano  
riconoscimento

8

Apri l'APP  
interfaccia  
Fare clic per avviare  
le domande frequenti

9

Per favore nelle FAQ  
Trovare una soluzione

## Flujo de conexión

1

En primer lugar, cuando  
usted toma el producto,  
asegúrese de que es  
suficiente, pulse el  
interruptor de llave  
para abrir

2

teléfono abierto  
ajustes  
Función Wi-Fi

3

Conectar  
suave-xxx

4

Abre la APLICACIÓN  
haga clic en el inicio

5

si te encuentras  
este aviso,  
Por favor no  
cambiar WiFi,  
continuar usando

6

Usar la aplicación  
para registrar  
y tomar fotos

7

Activar el reconocimiento de t í mpano  
función de advertencia  
Alarma tras ver t í mpano  
reconocimiento

8

Open the APP  
interfaActivar el reconocimiento  
de t í mpano  
función de advertencia  
Alarma tras ver t í mpano  
reconocimiento  
Click to start FAQ

9

Please in the FAQ  
Find a solution

## Information to User

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Important:** Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.